

เก้าอี้นวดไฟฟ้า โคเวย์

coway


MC-S01B/MC-S01W



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nanb. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (InswS)

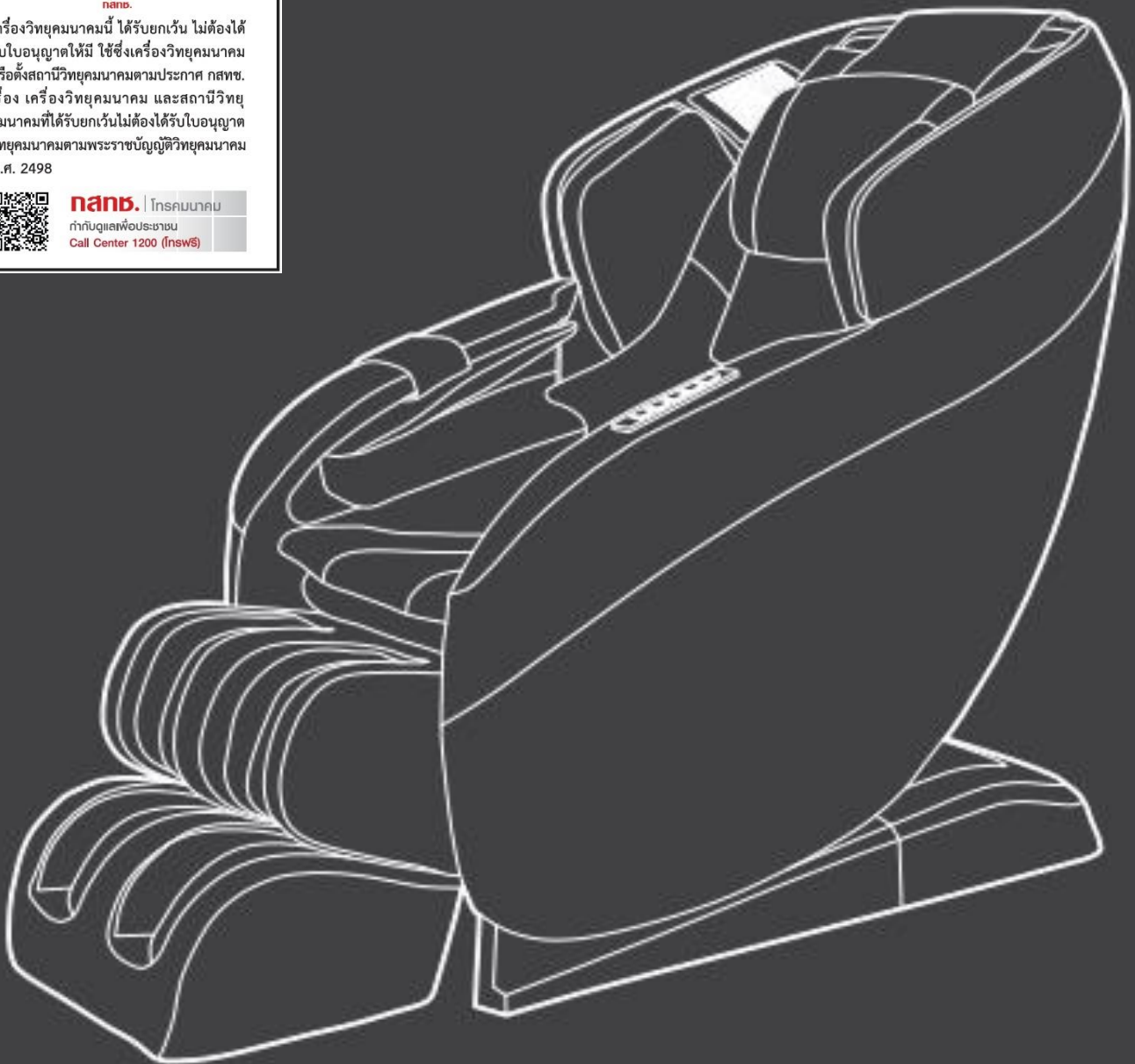

คู่มือการใช้งาน



โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยโดยละเอียดก่อนใช้เก้าอี้

เก้าอี้นวดไฟฟ้า

ข้อบ่งใช้: ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ชั่วคราวและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราว

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

1. เก้าอี้นวดไฟฟ้านี้ได้รับการปรับเปลี่ยนให้ความรู้สึกในการนวดที่เจ็บสบาย โดยมาพร้อมเทคนิคการนวดที่หลากหลาย เช่น การนวด การเคาะ การแตะ การกดจุดแบบชิตตี้ และการนวด-แตะ ที่เลียนแบบเทคนิคของพนักงานนวดจริงๆ
 2. มีคุณสมบัติในการสแกนร่างกายที่สามารถนวดร่างกายได้อย่างแม่นยำตามความสูงและขนาดที่แตกต่างกัน
 3. วัตถุประสงค์ของปั๊มที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุคือเพื่อความสะดวกและให้ผู้ใช้งานสัมผัสกับคุณสมบัติไร้แรงโน้มถ่วงที่แท้จริง ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
 4. ด้วยเทคโนโลยีประหยัดพื้นที่ ใช้พื้นที่ว่างเพียง 5 ซม. ระหว่างเก้าอี้นวดกับผนังเพื่อผลิตเพลนกับการนวดแม่นยำในพื้นที่จำกัด
 5. ด้วยการผสมผสานระหว่างลูกกลิ้งนวดและถุงลมที่เท้า ช่วยกระตุ้นจุดสะท้อนของเท้า ซึ่งสามารถเปิดเส้นลมปราณและปรับข้อต่อได้
 6. ด้วยการเพิ่มลูกกลิ้งนวด 4 ลูกและถุงลมบริเวณน่อง ช่วยคลายความตึงของกล้ามเนื้อ ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
 7. การนวดด้วยแรงดันอากาศช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและปรับปรุงระบบน้ำเหลือง
 8. ที่วางขาสามารถยืดและหดได้ภายในระยะ 22 ซม. เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 100 กก. และสูงระหว่าง 155 ซม. ถึง 185 ซม.
 9. ด้วยปั๊มกดบนที่วางแขนที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุและหน้าจอ LCD ความละเอียดสูงบนรีโมทคอนโทรล ทำให้สามารถควบคุมการตั้งค่าการนวดได้อย่างง่ายดาย
 10. เก้าอี้สำหรับนวดนี้มีลำโพง Bluetooth ในตัวซึ่งช่วยให้สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ใดๆ ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้
 11. ด้วยการผสมผสานรวมเทคนิคการนวดเข้ากับการบำบัดด้วยความร้อน ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้นและบรรเทาอาการปวดหลัง
 12. ด้วยพอร์ต USB ที่ซ่อนอยู่ในที่วางแขนด้านซ้าย ท่านสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ในขณะที่กำลังผลิตเพลนกับการนวด
- ◆

 1. ขอบพระคุณที่เลือกใช้เก้าอี้นวดไฟฟ้า Coway
 2. โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการใช้งาน
 3. โปรดเก็บรักษาคู่มือฉบับนี้ไว้ในสถานที่ปลอดภัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป
 4. โปรดให้ความสำคัญกับคำแนะนำด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ: เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรูปแบบใดๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปภาพในคู่มือผู้ใช้นี้เป็นเพียงภาพประกอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูผลิตภัณฑ์จริง

สารบัญ

การเตรียมความพร้อม	
คำแนะนำด้านความปลอดภัย -----	4
โครงสร้างภายนอก -----	8
โครงสร้างภายใน -----	9

การติดตั้ง	
การติดตั้ง -----	10

การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน	
สภาพแวดล้อมโดยรอบ -----	14
วิธีการเคลื่อนย้าย การตั้งค่าก่อนการนวด -----	15

การนวด	
รีโมทคอนโทรล -----	16
คำอธิบายกราฟิกบนจอแสดงผล LCD -----	18
ปั๊มกดที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ -----	20

คำแนะนำการใช้งานและภาพประกอบฟังก์ชันการใช้งาน	
การเปิดเครื่อง/การปิดเครื่อง -----	22
ภาพประกอบฟังก์ชันการใช้งาน -----	23

ภายหลังการนวด	
การเก็บเก้าอี้นวดไฟฟ้า -----	24

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา -----	25

อื่นๆ	
คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา -----	26
ข้อมูลทางเทคนิค -----	27

โปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในสถานที่ปลอดภัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

WARNING

สัญลักษณ์นี้หมายถึงสถานการณ์อันตรายซึ่งอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้

CAUTION

สัญลักษณ์นี้หมายถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง

• "คำแนะนำด้านความปลอดภัย" มีอยู่ในทั้งคำเตือนและข้อควรระวังสำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

• โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้เก้าอี้นวดไฟฟ้านี้

ความหมายของสัญลักษณ์

	สัญลักษณ์นี้หมายถึงพฤติกรรมที่ห้ามกระทำ		สัญลักษณ์นี้หมายถึงห้ามถอดประกอบเอง
	สัญลักษณ์นี้หมายถึงคำแนะนำที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้งานเก้าอี้นวด		สัญลักษณ์นี้หมายถึงสายเคเบิลทำงานอย่างเหมาะสม

• ควรเก็บข้อความต่อไปนี้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป

WARNING			
	• ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุน กระดูกสันหลังหัก และโรคปวดเฉียบพลัน เช่น อาการเคล็ดขัดยอกหรือกล้ามเนื้อตึง • ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ (รวมถึงผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือผู้ที่ใช้เครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ) • ไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเมเร็ง • ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติทางกายารับรู้ขึ้นเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดส่วนปลายในระดับสูง เช่น โรคเบาหวาน • ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการกระดูกสันหลังคด • ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีหมอนรองกระดูกเคลื่อน (หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท) • ไม่เหมาะสำหรับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่เพิ่งคลอดบุตร และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดี • ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ที่ได้รับบาดเจ็บ เช่น ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน หลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน และการอักเสบของผิวหนังต่างๆ • ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่มีความผิดปกติของระบบควบคุมอุณหภูมิและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความร้อน • ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่มีความผิดปกติทางสุขภาพ (อาการอักเสบเฉียบพลัน เช่น อาการหมดแรง หนาวสั่น ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง ความอ่อนล้าทางร่างกาย) • ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป • ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติสัมปชัญญะ มีความผิดปกติทางจิต จิตใจไม่ปกติ และไม่สามารถในการทำงานเก้าอี้นวดได้ • ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะดูแลตัวเองได้ เช่น ทารก • ห้ามใช้เก้าอี้นวดขณะที่มีมือเปียก • ห้ามใช้การนวดนี้หากมีความไวต่อหรือแพ้ความร้อน • อย่าปล่อยกลับบนเก้าอี้นวดตัวนี้ • ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตไม่ควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ • ผู้ใช้ควรใช้อย่างมีวิจารณญาณ ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือความไม่สบายตัว		

WARNING			
	• ก่อนนั่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในส่วนต่างๆ ของเก้าอี้นวด • เมื่อปรับพนักพิง ปรับเก้าอี้ให้อยู่ในท่าปรับเอนขึ้นและลง หรือทำเหยียดน่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้คนหรือสิ่งของอยู่ในบริเวณดังกล่าว (ด้านหลัง ด้านล่าง หรือด้านหน้าของเก้าอี้นวด) • ในกรณีเกิดความผิดปกติทางกายภาพหรือความผิดปกติจากการใช้งาน ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์ • ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของลูกกลิ้งนวดรอบศีรษะและคอ เพราะไม่ควรก้มหน้ามากเกินไป • หลีกเลี่ยงการนวดคอมากเกินไป • ห้ามนวดบริเวณหน้าท้องหรือหัวเข่าด้วยเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้ • หยุดการนวดก่อนจะลุกออกจากที่นั่งหรือหากต้องการลุกออกจากที่นั่ง • ห้ามใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ • ห้ามให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเล่นบนหรือรอบๆ เก้าอี้นวด (โดยเฉพาะในขณะที่ใช้งาน) และห้ามนั่งหรือยืนบนพนักพิงที่วางแขน หรือที่วางขา • ก่อนจะเคลื่อนย้ายเก้าอี้นวด ต้องปรับมุมพนักพิงและที่วางขาให้อยู่ในตำแหน่งเดิม อุบัติเหตุ / การบาดเจ็บ		
	• เมื่อประกอบให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กหลังจากที่เก้าอี้นวดกลับสู่ตำแหน่งเดิม • เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟเสียบเข้ากับเต้าเสียบอย่างแน่นหนาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าไหม้ • ถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานเก้าอี้นวด • ปิดสวิตช์และถอดสายไฟเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง ไฟไหม้และไฟดูด		
	• ไม่อนุญาตให้พนักเบาะเก้าอี้นวดเพื่อจัดเก็บ • ห้ามเปิดเครื่องโดยที่ไม่มีคนนั่งบนเก้าอี้นวดเป็นเวลานาน • ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลเมื่อเสียบปลั๊ก • ห้ามใช้เก้าอี้นวดไฟฟ้าหากสายไฟ ปลั๊ก หรือเคเบิลชำรุด หรือเคเบิลหลวม • ห้ามใช้เก้าอี้นวดไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด • ห้ามใช้เก้าอี้นวดไฟฟ้าหากสายไฟและปลั๊กชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ • ห้ามวางของหนักทับสายไฟ • ห้ามจ่อ คิง บิด หรือมัดสายไฟ • หลีกเลี่ยงการวางสายไฟไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใกล้กับเครื่องทำความร้อนมากเกินไป ไฟไหม้และไฟดูด		
	• หากเก้าอี้นวดชำรุด เสียหาย โดนน้ำกระเซ็นหรือหยดใส่ โปรดติดต่อ Call center เบอร์ 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิคของ Coway ดำเนินการซ่อมแซม • หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด โปรดอย่าเปลี่ยนด้วยตัวเอง โปรดติดต่อ Call center เบอร์ 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิคของ Coway เปลี่ยนสายไฟหรือปลั๊ก • เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บ โปรดอย่าเปิดหรือถอดชิ้นส่วนใดๆ ของเก้าอี้นวด โปรดติดต่อ Call center เบอร์ 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิคของ Coway ดำเนินการซ่อมแซม • หากหนังหรือเบาะรองนั่งของเก้าอี้นวดชำรุด โปรดหยุดใช้งานเก้าอี้ดังกล่าวและโปรดติดต่อ Call center เบอร์ 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิคของ Coway ดำเนินการซ่อมแซม การถอดประกอบและการบำรุงรักษา		

⚠ CAUTION		
!	โปรดใช้งานเก้าอี้นวดไฟฟ้าบนพื้นผิวที่เรียบหรืออยู่ในระดับที่เสมอกัน	เพื่อป้องกันการล้มกะทันหัน
	ระยะเวลาสูงสุดที่แนะนำคือ 20 นาที หากนวดบริเวณเดิมซ้ำๆ อาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัว	การนวดเป็นเวลานานเกินไปไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย
	เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ โปรดตรวจสอบทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าศีรษะอยู่ในตำแหน่งการนวดที่ต้องการ	เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
	ควรเก็บรีโมทคอนโทรลไว้ในกระเป๋าทิ้งห่างมือไว้ให้รีโมทคอนโทรลถูกพับหรือหล่นเสียหาย	
	โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ไฟอยู่ที่ปุ่ม “ปิด” ก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบสายไฟ	
	ปิดการควบคุมทั้งหมดก่อนที่จะถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ	เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุขณะเปิดสวิตช์ไฟ
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟเสียบเข้ากับเต้าเสียบสายไฟจนสุด	เพื่อลดการเกิดไฟดูดและความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้
	โปรดตรวจสอบว่าสายไฟได้รับความเสียหายหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษซากหรือน้ำบนสายไฟ	เพื่อป้องกันไฟดูดในกรณีที่มีไฟรั่วหรืออุปกรณ์ชำรุด
	ต่อสายดินให้ถูกต้อง โดยเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่มีสายดิน และสายดินต้องไม่งอหรือถูกตัดออก	
⊘	- ห้ามกดลูกกลิ้งนวดด้วยมือหรือเท้า - ห้ามสอดมือเข้าไปในที่วางแขนหรืออุ้งลม - ห้ามสอดมือหรือเท้าเข้าไปในช่องว่างของชิ้นส่วนตัวเครื่อง - ห้ามทิ้งหรือใส่สิ่งใดลงไปลงในช่องต่างๆ ของเก้าอี้นวด - ห้ามยืน นั่ง หรือวางสิ่งของใดๆ บนพนักพิง ที่วางแขน หรือที่วางขา - ห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้นวดขณะใช้งาน - ห้ามยืนบนเก้าอี้นวดขณะใช้งาน - ห้ามดึงปลั๊กไฟหรือปิดเครื่องขณะใช้งาน - ห้ามวางมือหรือศีรษะไว้บริเวณที่วางขาหรือใต้ที่วางขา - ห้ามใช้เก้าอี้นวดในขณะที่มีวัตถุแข็งๆ วางอยู่บนศีรษะ เช่น เครื่องประดับผม - ห้ามใส่ของแข็งไว้ในกระเป๋าทะแนวด้านขาหรือสะโพก - ห้ามนั่งหรือกดพนักพิงขณะเก้าอี้นวดอยู่ในตำแหน่งนอน - ห้ามใช้เก้าอี้นวดกับผิวหนังโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองผิวหนังหรือแผลไหม้เนื่องจากความร้อนจัด - เพื่อหลีกเลี่ยงการพันกับเก้าอี้นวด โปรดอย่าสวมเสื้อผ้าหลวมๆ หรือเครื่องประดับในขณะที่ใช้งาน - เพื่อหลีกเลี่ยงผมพันกับเก้าอี้นวด โปรดมัดผมไว้หรือมัดผมให้ห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว	เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ
	- เก็บเก้าอี้นวดให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน สถานที่ซึ่ง วัตถุมีคม สารเคมีกัดกร่อน สภาพแวดล้อมที่ติดไฟและระเบิดได้ - ห้ามใช้ผ้าท่อนไฟหรือผลิตภัณฑ์ทำความร้อนอื่นๆ บนเก้าอี้นวด - เก็บเก้าอี้นวดให้ห่างจากเตาหรือผลิตภัณฑ์ทำความร้อนอื่นๆ - เก็บเก้าอี้นวดให้ห่างจากฝุ่นละออง - ห้ามวางเก้าอี้นวดในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรงหรือในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง - ห้ามวางเก้าอี้นวดในพื้นที่แคบ - ห้ามใช้เก้าอี้นวดในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่ดี - ห้ามใช้เก้าอี้นวดกลางแจ้ง	เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สีหนังของเก้าอี้ซีดเพี้ยน หรือเสื่อมสภาพ


⚠ CAUTION		
⊘	- ห้ามวางหรือเก็บเก้าอี้นวดในสถานที่ เช่น สระว่ายน้ำ หรือห้องน้ำ - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก้าอี้นวดและรีโมทคอนโทรลอยู่ในสภาพแห้งตลอดเวลา - ห้ามใช้เก้าอี้นวดหากร่างกายของผู้ใช้เปียก	เพื่อป้องกันไฟดูด
⏚	- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณต่อสายดินอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต หากคุณไม่ทราบวิธีต่อสายดิน โปรดติดต่อ Call center เบอร์ 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิคของ Coway ดำเนินการซ่อมแซม - ห้ามใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์ (หากปลั๊กไม่ตรงกับเต้ารับ โปรดอย่าเปลี่ยนปลั๊กด้วยตนเอง และให้ช่างเทคนิคของ Coway ติดตั้งเต้ารับที่ตรงกัน)	เพื่อป้องกันไฟดูด
🔌	- ถอดปลั๊กออกก่อนทำความสะอาดเก้าอี้นวด - ถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้เก้าอี้นวด	เพื่อหลีกเลี่ยงไฟดูดหรืออันตรายจากไฟไหม้
	ถอดปลั๊กออกหากพบว่าแหล่งจ่ายไฟได้รับความเสียหาย	
	จับปลั๊กเพื่อถอดสายไฟ	
	โปรดปิดสวิตช์และถอดปลั๊กออกหลังจากนวด	เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
	โปรดปิดสวิตช์ไฟและถอดสายไฟออกเมื่อไฟดับ	เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรืออุบัติเหตุเมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

คำแนะนำในการต่อสายดิน

✦ ✖ เก้าอี้นวดมีสายไฟพร้อมสายดิน ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่เหมาะสมเพื่อให้เก้าอี้นวดทำงานได้



การเปลี่ยนฟิวส์

✦ ✖ เมื่อฟิวส์ขาด โปรดติดต่อ Call center เบอร์ 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิคของ Coway ดำเนินการซ่อมแซม

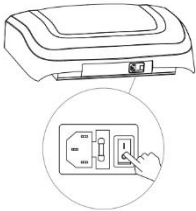


⚠ ไม่อนุญาตให้เก็บสายดินในสถานที่เหล่านี้	ข้อแก้ไข : อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้ สายโทรศัพท์และสายล่อฟ้า : อาจทำให้เกิดไฟดูดและไฟไหม้ได้เมื่อมีฟ้าร้อง ท่อน้ำ : สายดินไม่มีประโยชน์ในบริเวณที่มีพลาสติกอยู่
---	--

โครงสร้างภายนอก

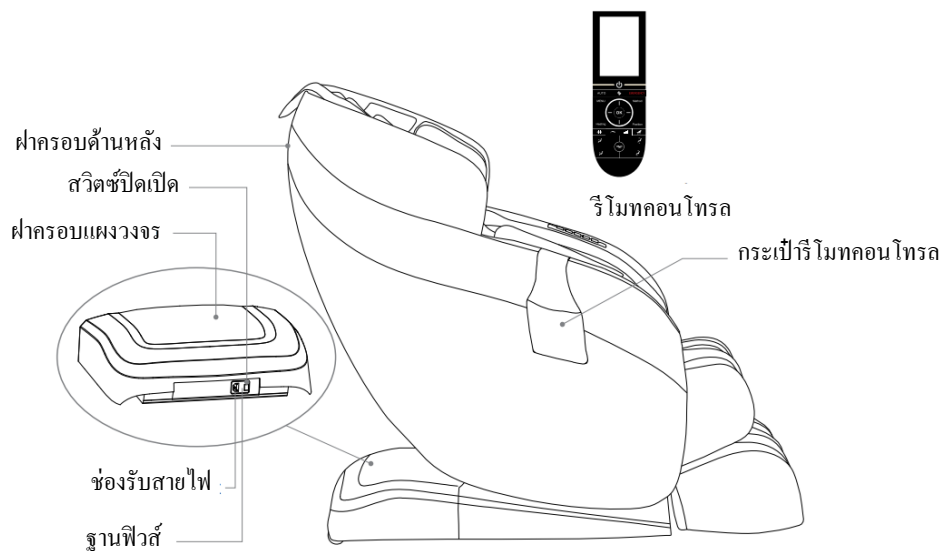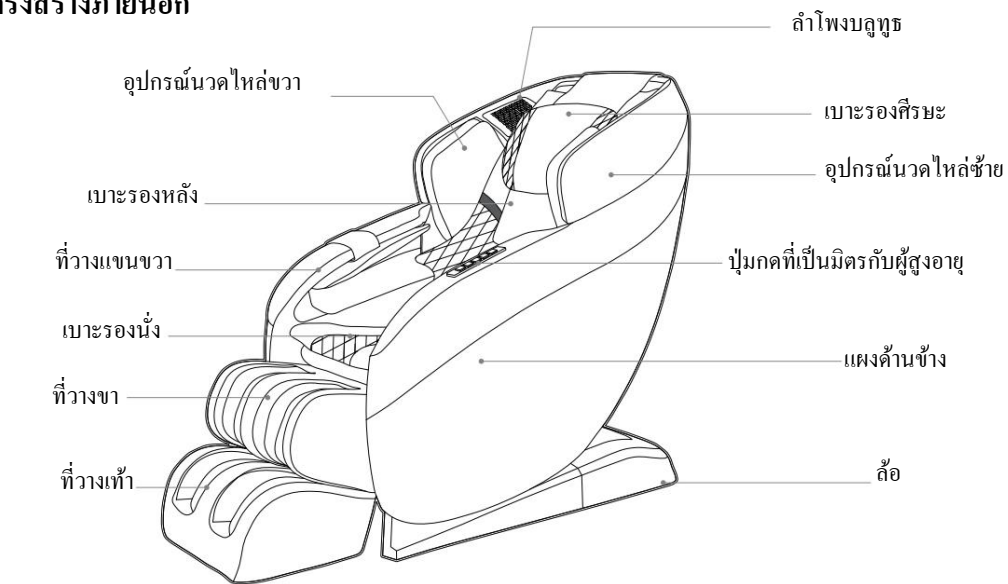

โครงสร้างภายใน

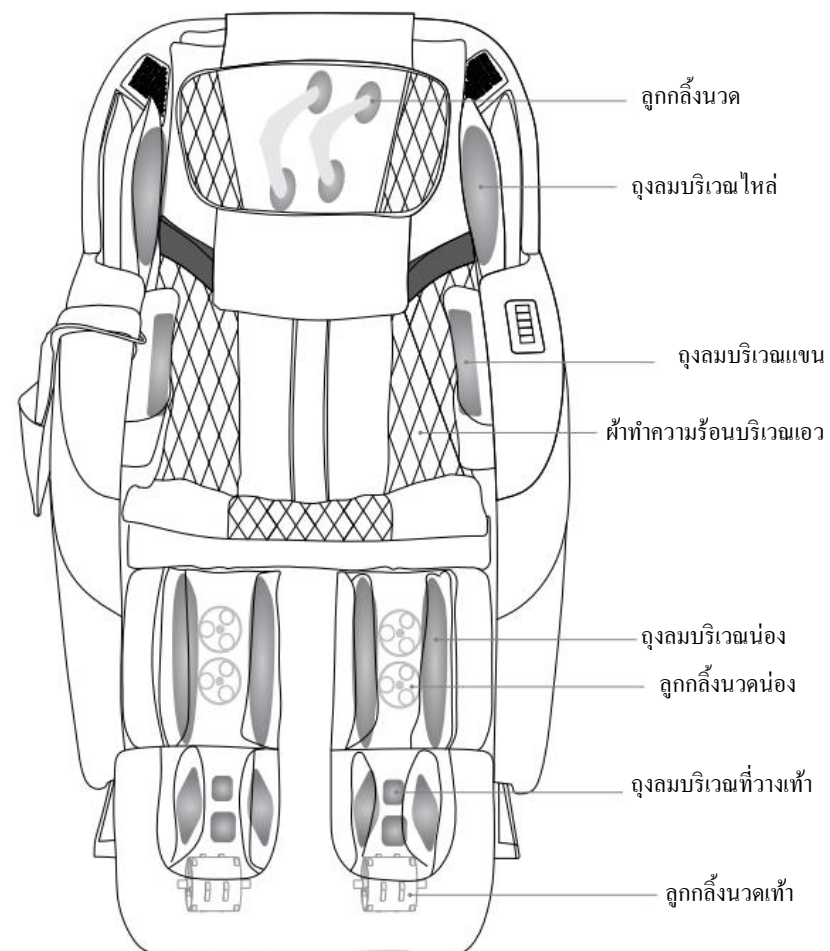


การติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1

นำตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมออกจากกล่องกระดาษแข็ง


- 1 นำกล่องอุปกรณ์เสริมและที่วางขาออกมา
- 2 นำตัวเครื่องเก้าอี้นวดออกมา
- 3 ตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดครบถ้วนหรือไม่

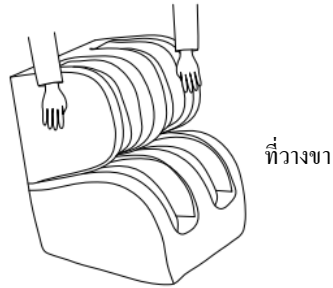

ที่วางขา

นำที่วางขาออกจากกล่องกระดาษแข็งโดยจับที่ด้านซ้ายและขวาของที่วางขา

ตัวเครื่องเก้าอี้นวดไฟฟ้า

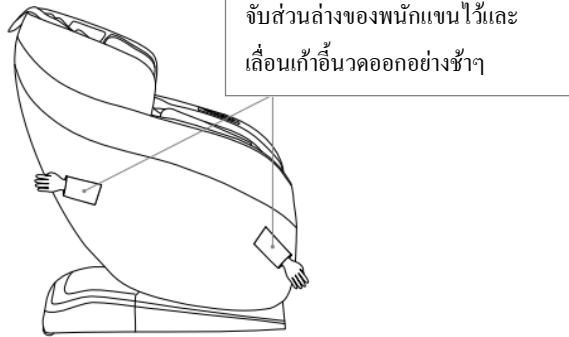

อุปกรณ์เสริม



สายไฟ




คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2


ใส่รีโมทคอนโทรลไว้ในกระเป๋ารีโมทคอนโทรล

- 1 ถอดกระเป๋ารีโมทคอนโทรลออกจากถุงลมแขนด้านในฝั่งขวา
- 2 ใส่รีโมทคอนโทรลลงในกระเป๋ารีโมทคอนโทรล

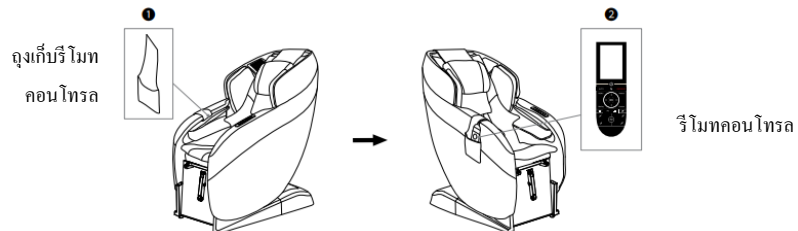


การตรวจสอบสภาพแวดล้อม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอในการปรับเอน

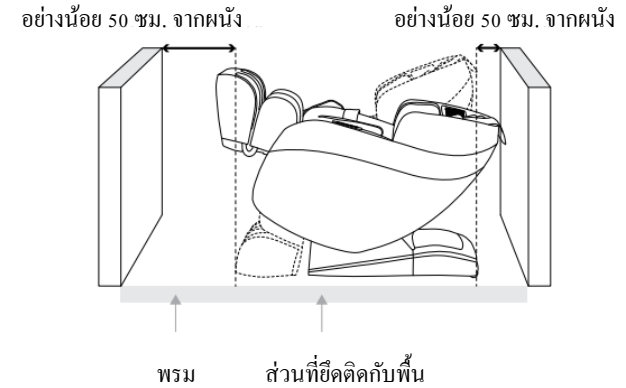

เนื่องจากเก้าอี้นวดมีน้ำหนักมาก โปรดใช้เสื่อ พรม หรือวัสดุพื้นนุ่มเพื่อปกป้องพื้น

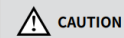

CAUTION

- ห้ามวางเก้าอี้นวดในบริเวณที่เปียกชื้น เช่น สระว่ายนํ้า และห้องนํ้า เพื่อหลีกเลี่ยงไฟรั่วหรือไฟดูด
- ห้ามวางเก้าอี้นวดไว้กลางแดด เพื่อป้องกันไม่ให้เบาะเสื่อม สีซีดจาง หรือเปลี่ยนสี
- ห้ามวางเก้าอี้นวดใกล้เตาหรือบริเวณที่มีความร้อนอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงเบาะเสื่อมสภาพ
- โปรดวางเก้าอี้นวดบนพื้นผิวที่เรียบ เพื่อป้องกันไม่ให้เก้าอี้นวดหล่นหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอื่นๆ


ขั้นตอนที่ 3

ติดตั้งที่วางขา

- ❶ วางส่วนหลังของที่วางขาไว้ใกล้กับด้านหน้าเก้าอี้νωด
- ❷ เสียบปลั๊กไฟบริเวณขาและเท้าเข้ากับเต้ารับบนตัวเครื่องและปลั๊กท่ออากาศบนตัวเครื่อง
- ❸ ยกที่วางขาขึ้นด้วยมือทั้งสองข้าง ดันเพลลาของที่พักขาไปทางมุมระดับของตัวแขน และล็อกเข้ากับตัวเครื่อง
- ❹ ดัดคืนตุ๊กแกของที่วางขาเข้ากับเบาะรองนั่ง



หมายเหตุ: ต้องยึดเพลลาให้แน่น มิฉะนั้นจะหลุดออก เมื่อเสียบปลั๊กท่อลมและสายรัดสายไฟ อย่าพันท่อลมและสายรัดสายไฟเข้าด้วยกัน

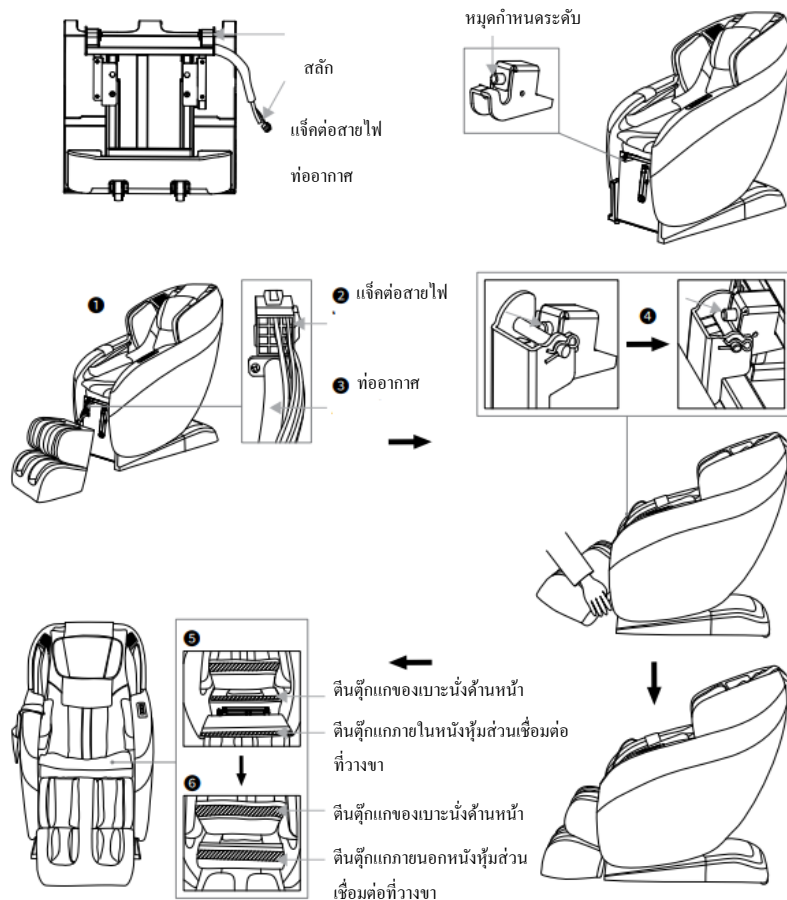


ขั้นตอนที่ 4

ภายหลังการประกอบ

- ❶ เสียบสายเคเบิลเข้ากับช่องรับสายไฟ
- ❷ เปิดสวิตช์ด้านหลังกล่องไฟ (สวิตช์ “เปิด/ปิด”, “O/I”, กด “I” เพื่อเปิดเครื่อง)
- ❸ ใช้รีโมทคอนโทรลเลือกโปรแกรมการนอนที่ต้องการ



ทำให้มั่นใจก่อนว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนเสียบสายไฟเข้ากับช่องรับสายไฟ

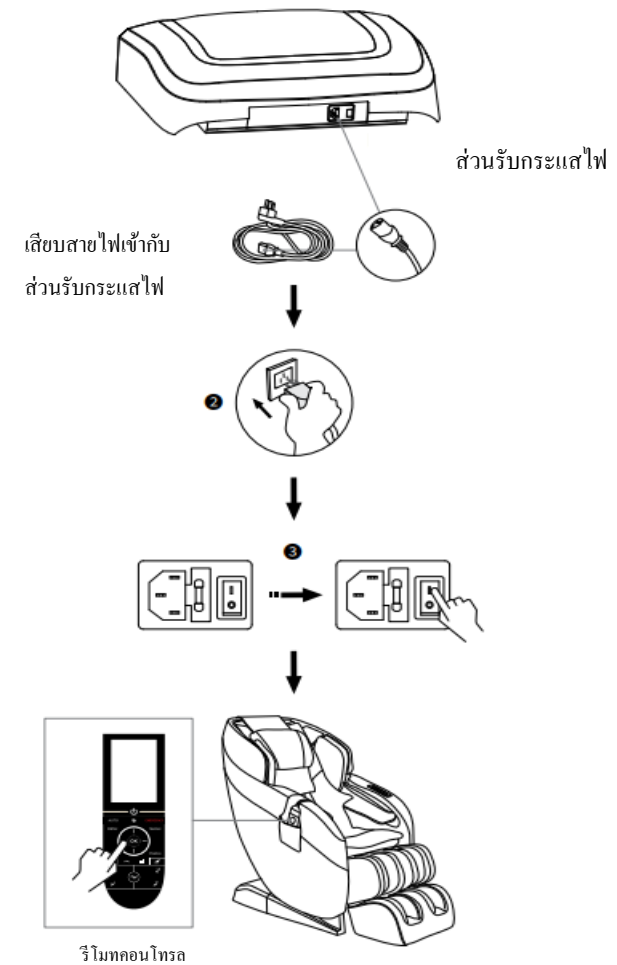


สภาพแวดล้อมโดยรอบ

⚠ CAUTION	
	ห้ามวางเก้าอี้บนบริเวณเปียก เช่น สระว่ายน้ำ และห้องน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดไฟรั่วหรือไฟดูด
	ห้ามวางเก้าอี้บนไวร์กลางแดด ใกล้เคียงเตา หรือบริเวณที่มีความร้อนอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เบาะเสื่อม
	โปรดวางเก้าอี้บนพื้นผิวเรียบ เพื่อป้องกันไม่ให้เก้าอี้พลิกคว่ำหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอื่นๆ


การตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ

- ตรวจสอบบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของเก้าอี้เพื่อให้น้ำใจว่ามีผู้คน สัตว์เลี้ยง หรือวัตถุอื่น ๆ อยู่บริเวณนั้น

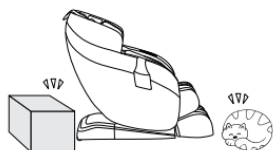


การตรวจสอบสายไฟและปลั๊ก

- ใช้ผ้าแห้งเช็ดฝุ่นบนปลั๊กเป็นประจำ
- ห้ามงอ ดึง บิด หรือมัดสายไฟ

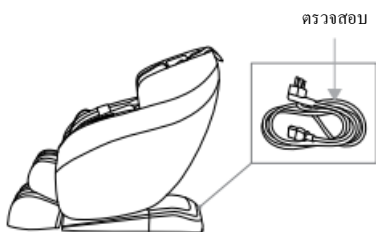


พื้นที่ว่างสำหรับวางเก้าอี้

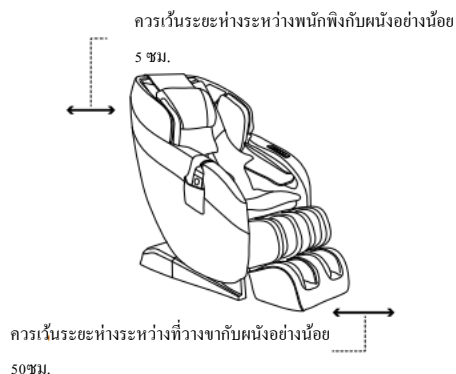

การตรวจสอบสภาพโดยรอบ

เมื่อพนักพิงหรือที่วางขาเอนหรือยืดออก พึงคำนึงว่า:

- ตรวจสอบว่ามีคน สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งของใด ๆ อยู่รอบ ๆ เก้าอี้หรือไม่
- ตรวจสอบขนาดพื้นที่

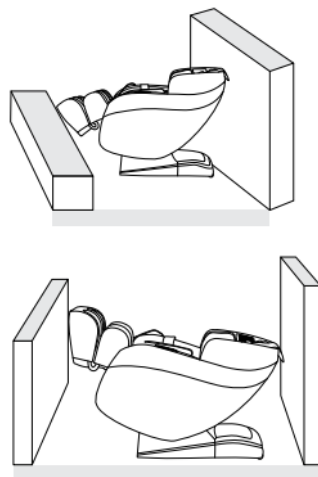

วิธีการเคลื่อนย้าย

⚠ CAUTION	
	❖ ห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ในขณะที่ยังมีแรงดันไฟฟ้าทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือความเสียหาย

การปกป้องพื้น

- ❖ มัดสายเคเบิลและวางไว้บนที่นั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายขณะเคลื่อนย้ายเก้าอี้
- ❖ ห้ามทำเก้าอี้คว่ำหรือปล่อยเก้าอี้คว่ำทันทีขณะเคลื่อนย้ายเก้าอี้
- ❖ ห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้บนพื้นไม้ พื้นผิวขรุขระ หรือในพื้นที่แคบ
- ❖ ห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากช่างเทคนิคของ Coway
- ❖ ทำให้มั่นใจก่อนว่าสวิทช์เปิดและถอดปลั๊กก่อนทำการเคลื่อนย้ายเก้าอี้

การเคลื่อนย้ายเก้าอี้แนวไฟฟ้า

ถอดส่วนศีรษะเพื่อให้เก้าอี้เอนไปด้านหลังและดึงบนล้อหลังจากนั้นค่อยๆ ดันเก้าอี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและวางลงอย่างช้าๆ



	โปรดจับที่วางเท้าไว้ขณะเคลื่อนย้ายเก้าอี้เพื่อป้องกันอันตรายจากรอยขีดข่วน ในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่ายกที่วางแขนขึ้น
--	---

การตั้งค่าก่อนการนวด

ก่อนการปรับตั้งค่า

- ❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกกลิ้งขนาดหุ้ดอยู่ที่ส่วนบนของพนักพิง จากนั้นจึงค่อยๆ นวดบนเก้าอี้
- ❖ การวางลูกกลิ้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้



ตำแหน่งที่ต้อง

เอนหลังบนพนักพิงและศีรษะบนเบาะรองศีรษะ หลังจากการตรวจจบไหล่เสร็จสิ้นเก้าอี้จะส่งเสียง "บีบ" สามครั้ง ดำเนินการปรับเอนเล็กน้อยโดยการกดปุ่ม "ขึ้น/ลง" บนรีโมทคอนโทรล


- ❖ การตรวจจบตำแหน่งไหล่ของผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อความสะดวกสบายในการนวด

คำแนะนำ



หากรู้สึกว่าการนวดไม่เพียงพอ อาจถอดเบาะรองศีรษะ ออกได้

เนื่องจากเก้าอี้มีน้ำหนักมาก จึงอาจทำให้พื้นเสียหายได้ในระยะยาว โปรดใช้เสื่อพรม หรือวัสดุนุ่มเพื่อปกป้องพื้นของคุณ

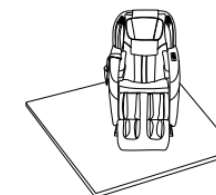

รีโมทคอนโทรล



1		เปิด/ปิด	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มหรือหยุดโปรแกรมการนวด
2		ออโต้	กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรมนวดอัตโนมัติ 3 โปรแกรม ได้แก่ "ฟื้นฟู", "บรรเทา" และ "ชดเชยเนื้อ" เวลาทำงานเริ่มต้นคือ 20 นาที
3		แรงดันอากาศ	กดปุ่มนี้เพื่อเลือกการนวดด้วยแรงดันอากาศทั่วร่างกายซึ่งรวมถึงร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง
4		ปุ่มฉุกเฉิน	กดปุ่มนี้เพื่อหยุดฟังก์ชันการนวดทั้งหมด และสามารถเลือกปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อกลับมาใช้เก้าอี้นวดได้เท่านั้น
5		เมนู	กดปุ่มนี้เพื่อสลับหน้าจอของรีโมทคอนโทรลไปหน้าจอเมนู คุณสามารถเลือกใช้โปรแกรมการนวดได้โดยกดปุ่มเลือก "อัตโนมัติ" จากนั้นกดปุ่มนำทาง (ขึ้น ลง ซ้าย ขวา) และปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยัน โปรแกรมการนวดการตั้งค่าการนวดอื่นๆ จะปรากฏขึ้นหลังจากกดปุ่ม "เมนู"
6		วิธีการ	กดปุ่มนี้เพื่อเลือกวิธีการนวด 5 วิธี ได้แก่ การนวด การเคาะ การกดจุด การกดจุดแบบชีดส์ และการนวดและเคาะ
7		ทำความร้อน	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดฟังก์ชันทำความร้อนบริเวณเอว เมื่อเปิดระบบทำความร้อน สัญลักษณ์ทำความร้อนที่เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เมื่อปิดระบบทำความร้อน สัญลักษณ์ทำความร้อนที่เกี่ยวข้องจะหายไป
8		ปรับตำแหน่ง	เมื่อเก้าอี้นวดอยู่ในโหมดนวดแบบกำหนดเอง ให้กดปุ่มนี้เพื่อเลือกตัวเลือกการนวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ "ทั้งหมด" "บางส่วน" และ "บางจุด"
9		ปุ่มกดนำทาง	กดปุ่มนำทาง (ขึ้น, ลง, ซ้าย, ขวา) เพื่อใช้เป็นปุ่มนำทางเมนูในโหมดเมนู โดยสามารถใช้ปุ่ม "ขึ้น" และ "ลง" เพื่อเลือกการเมนูอย่างรวดเร็ว และปุ่ม "ซ้าย" และ "ขวา" เพื่อเข้าสู่เมนูก่อนหน้าและถัดไปอย่างรวดเร็ว ปุ่ม "ขึ้น" และ "ลง" ทำหน้าที่ปรับตำแหน่งของเก้าอี้นวดด้วยตนเองระหว่างการตรวจนับความสูงของไหล่และฟังก์ชันปรับจุดจะถูกกำหนดไว้ในโหมดการนวดด้วยตนเอง
10		โอเค-ปุ่มกดยืนยัน	กดปุ่มนี้เพื่อยืนยันการเลือกเมนูและปิดเมนูถัดไป
11		ระยะกว้างของลูกกลิ้งนวด	กดปุ่มนี้เพื่อปรับระยะกว้างของลูกกลิ้งนวด ซึ่งได้แก่ "แคบ" "กลาง" และ "กว้าง" ในระหว่างการเคาะ การกด และการกดจุดแบบชีดส์แบบกำหนดเอง
12		ความแน่นของลูกกลิ้ง	กดปุ่มนี้เพื่อปรับระดับความแรงของการนวดด้วยลูกกลิ้งนวดได้ 5 ระดับ
13		ความเร็วของลูกกลิ้งนวด	กดปุ่มนี้เพื่อปรับความเร็วของลูกกลิ้งนวด 5 ระดับภายใต้สถานะการนวดแบบกำหนดเอง
14		ลูกกลิ้งขนาดเท้า	กดปุ่มนี้เพื่อปรับความเร็ว 3 ระดับ คือ "รวดเร็ว" "นุ่มนวล" และ "หยุด" บนลูกกลิ้งเท้าตามลำดับ
15		ปรับที่วางขาขึ้น	กดปุ่มนี้ค้างไว้ ที่วางขาจะยกขึ้น เมื่อปล่อยปุ่มนี้ ที่วางขาจะหยุดยกขึ้น
16		ปรับที่วางขา	กดปุ่มนี้ค้างไว้ ที่วางขาจะเลื่อนลง เมื่อปล่อยปุ่มนี้ ที่วางขาจะหยุดเลื่อนลง
17		ปรับพนักพิงขึ้น & ที่วางขา	กดปุ่มนี้ค้างไว้ พนักพิงจะยกขึ้นและที่วางขาจะลดระดับลง หากปล่อยปุ่มนี้ พนักพิงและที่วางขาจะหยุดเคลื่อนไหว
18		ปรับพนักพิงลง & ที่วางขาขึ้น	กดปุ่มนี้ค้างไว้ พนักพิงจะเลื่อนลงและที่วางขาจะเลื่อนขึ้น หากปล่อยปุ่มนี้ พนักพิงและที่วางขาจะหยุดเคลื่อนไหว
19		ไม่มีแรงโน้มถ่วง	กดปุ่มนี้เพื่อปรับตำแหน่งเก้าอี้นวดให้อยู่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง จากนั้นกดปุ่มนี้เพื่อเรียกเก้าอี้นวดให้กลับสู่สถานะการทำงานเริ่มต้น โอคอนไร้แรงโน้มถ่วงบนอินเทอร์เน็ตหลักจะแสดงสถานะไร้แรงโน้มถ่วงหลังจากการนวดเริ่มต้น

คำอธิบายกราฟิกบนจอแสดงผล LCD

อินเทอร์เฟซเปิด/ปิด




หลังจากเปิดเครื่องแล้ว หากกดปุ่ม “เปิด/ปิด” เสียงสัญญาณจะดังขึ้นสั้นๆ และชัดเจน หน้าจอ LCD จะแสดงอินเทอร์เฟซเมนูหลักและเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย จากนั้น รีโมทคอนโทรลจะแสดงหน้าจอเมนูซึ่งมีตัวเลือก “อัตโนมัติ” “กำหนดเอง” “ถูกลม” “ลูกกลิ้ง” “การทำความร้อน” “ตัวตั้งเวลา” “การตั้งค่า” และ “หยุด”

ฟังก์ชันการนวด




อินเทอร์เฟซเมนู

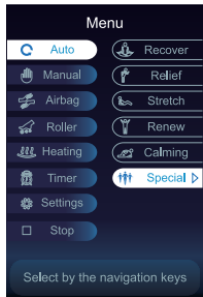

หลังจากกดปุ่ม “เมนู” ระบบจะสลับไปที่อินเทอร์เฟซเมนูและสามารถเลือกการนวดทั้งหมดได้ โดยกดปุ่มต่างๆ การกดปุ่ม “เมนู” จะออกจากอินเทอร์เฟซเมนูและกลับสู่อินเทอร์เฟซเปิด/ปิด การนวดอัตโนมัติ: หลังจากกดปุ่ม “เปิด/ปิด” เครื่องจะหยุดที่โปรแกรมการนวดอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซเมนู และหน้าจอของรีโมทคอนโทรลจะแสดงโปรแกรมการนวดต่อไปนี้: “พื้นผิว” “บรรเทา” “ยืดเส้นยืดสาย” “ฟื้นฟู” “สงบ” และ “พิเศษ” ภายใต้โปรแกรมการนวด “พิเศษ” มีโปรแกรมการนวดอัตโนมัติสองโปรแกรมให้เลือก ได้แก่ “เสริมความสดชื่น” และ “เพิ่มพลังงาน”

การนวดแบบกำหนดเอง

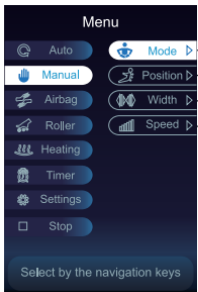


Refresh
Energy




ในอินเทอร์เฟซ “เมนู” ให้เลือกการนวดแบบกำหนดเองผ่านปุ่มนำทาง กดปุ่ม “ตกลง” แล้วตัวเลือกการทำงานที่เลือกจะปรากฏขึ้น ได้แก่ “โหมด” “ตำแหน่ง” “ระยะกว้าง” และ “ความเร็ว” หากกดเลือกตัวเลือก “โหมด” ให้กด “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกถัดไป และเลือกเทคนิคการนวดที่ต้องการ ได้แก่ การคลึง การทุบเบา การเคาะ การคลึงและการทุบเบา และการกดจุดชียัตซี หากกดตัวเลือก “ตำแหน่ง” ให้กด “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกถัดไป และเลือกส่วนของร่างกายที่ต้องการ ได้แก่ ทั้งหมด บางส่วน และเฉพาะจุด หากกดเลือกตัวเลือก “ระยะกว้าง” ให้กด “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกถัดไป และเลือกความเร็วที่ต้องการสำหรับลูกกลิ้งนวด ได้แก่ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5

ถูกลม

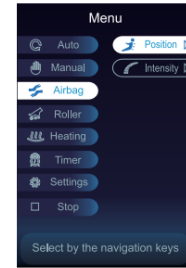


ในอินเทอร์เฟซ “เมนู” ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเลือกตัวเลือก “ถูกลม” จากนั้น ในตัวเลือก “ตำแหน่ง” กด “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกถัดไป และเลือกตำแหน่งร่างกายที่ต้องการ ได้แก่ ทั้งร่างกาย ส่วนบนของร่างกาย และส่วนล่างของร่างกาย กดเลือกตัวเลือก “ความแรง” กด “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกถัดไป และเลือกความแรงของการนวดถูกลมที่ต้องการ ได้แก่ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5

ตัวตั้งเวลา

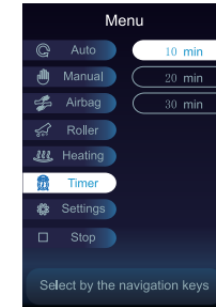


ในอินเทอร์เฟซ “เมนู” ให้ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเลือกระยะเวลาในการนวด กด “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกถัดไป และเลือกระยะเวลาในการนวดที่ต้องการ - 10 นาที 20 นาที และ 30 นาที ระยะเวลาในการนวดที่ถูกต้องตั้งต้นไว้คือ 20 นาที ดังนั้น ถ้าเอนกจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลา

ลูกกลิ้งนวดเท้า

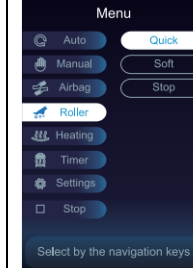

ในอินเทอร์เฟซ “เมนู” ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเลือกความเร็วของลูกกลิ้งนวด กด “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกถัดไป และเลือกความเร็วของลูกกลิ้งนวดเท้าที่ต้องการ ซึ่งได้แก่ เร็ว นุ่มนวล และหยุด

การตั้งค่า

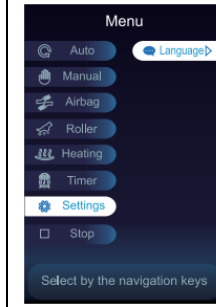


ในอินเทอร์เฟซ “เมนู” ให้ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเลือกการตั้งค่าการนวด กด “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกถัดไป และเลือกภาษาที่ต้องการ

หยุด




ในอินเทอร์เฟซ “เมนู” ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเลือกตัวเลือก “หยุด” กด “ตกลง” เพื่อหยุดโปรแกรมการนวด กดปุ่ม “เมนู” เพื่อกลับไปยังอินเทอร์เฟซ “เมนู”


การทำความร้อน

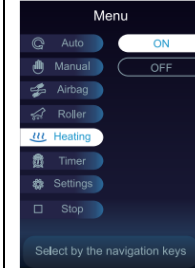

ในอินเทอร์เฟซ “เมนู” ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเลือกฟังก์ชันความร้อนสำหรับบริเวณเอว กด “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกถัดไป และเลือกฟังก์ชันความร้อนที่ต้องการ - เปิดและปิด

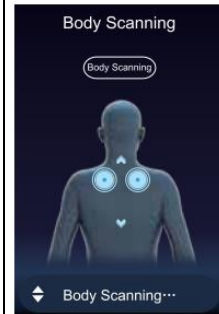

หลังจากเลือกโปรแกรมการนวดที่ต้องการแล้ว ถ้าเอนกจะเริ่มสแกนร่างกายและคำว่า “สแกนร่างกาย...” จะปรากฏบนหน้าจอของรีโมทคอนโทรล หลังจากการสแกนร่างกายเสร็จสิ้น เสียงสัญญาณจะดังขึ้น (หนึ่งครั้งทุก ๆ วินาที) เมื่อถึงจุดนี้ ลูกกลิ้งนวดจะอยู่ที่ตำแหน่งไหล่ ซึ่งสามารถกดขึ้นและลงเพื่อปรับตำแหน่งได้ เมื่อปรับลูกกลิ้งนวดแล้ว ข้อความ “กำลังปรับความสูงของไหล่...” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ระยะเวลาในการนวดเริ่มต้นคือ 20 นาที ถ้าเอนกจะปิดและรีเซ็ตเป็นตำแหน่งตั้งตรงเมื่อการนวดเสร็จสิ้น

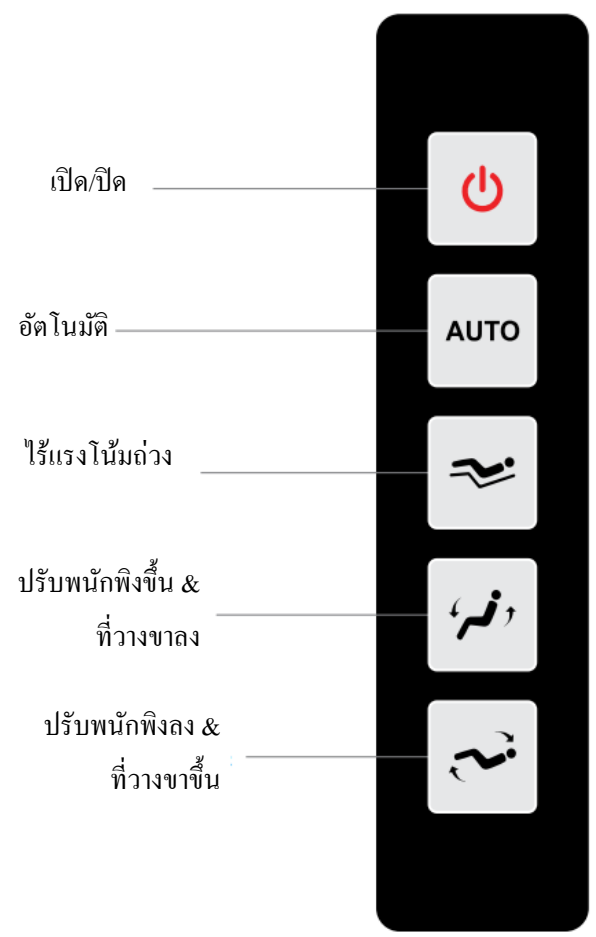


1		กดปุ่ม “ON/OFF” เพื่อเปิดหรือปิดเก้าอี้นวด
2		หลังจากเปิดเก้าอี้นวดแล้ว ให้กดปุ่ม “อัตโนมัติ” เพื่อเลือกโปรแกรม นวดอัตโนมัติ 3 โปรแกรมพร้อมไฟ LED แสดงสถานะสีต่างๆ: พื้นตัว บรรเทา ยืดกล้ามเนื้อ
3		หลังจากเปิดเก้าอี้นวดแล้ว ให้กดปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งไว้แรงโน้มถ่วง กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตเก้าอี้นวดให้กลับเป็นตำแหน่งตั้งตรง
4		กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อให้พนักพิงหลังยกขึ้นและที่วางขาลดระดับลง ปลดปล่อยปุ่มนี้ พนักพิงหลังและที่วางขาจะหยุดเคลื่อนไหว และเก้าอี้นวดจะอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ
5		กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อให้พนักพิงลดลงและที่วางขา ยกขึ้น ปลดปล่อยปุ่มนี้ พนักพิงและที่วางขาจะหยุดเคลื่อนไหว และเก้าอี้นวดจะอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ

การเปิดเครื่อง/การปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1

การเปิดเครื่อง

- 1 เสียบสายไฟเข้ากับช่องรับกระแสไฟซึ่งระบุเป็น “a” ในแผนผัง
- 2 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ
- 3 กดปุ่ม “ON/OFF” ที่ปลั๊กไฟเพื่อเปิดเก้าอี้นวด
- 4 กดปุ่ม “ON/OFF” บนรีโมทคอนโทรล จะมีเสียงบี๊บหนึ่งครั้งและเข้าสู่อินเทอร์เฟซเมนูหลัก

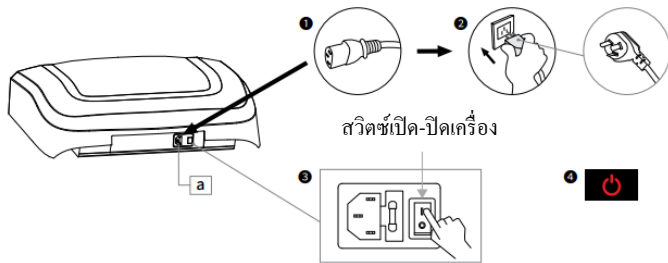

ขั้นตอนที่ 2

การนวด

- 1 เก้าอี้นวดจะทำงานตามรูปแบบการนวดที่เลือกไว้ สำหรับวิธีการนวด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 16 และ 17


- 2 หลังจากการนวดสิ้นสุดลง เก้าอี้นวดจะกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น และหน้าจอแสดงผลจะดับลง



ขั้นตอนที่ 3

การปิดเครื่อง

- 1 กดปุ่ม “เปิด/ปิด” เพื่อปิดเก้าอี้นวด และเก้าอี้จะกลับคืนสู่ตำแหน่งตั้งตรงโดยอัตโนมัติ
- 2 หลังจากถูกกลิ้งนวดกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น ให้ปิดสวิทช์ไฟที่ตัวเครื่อง
- 3 ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ

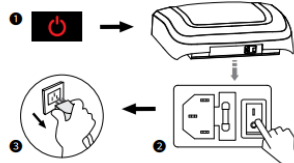

1. ก่อนใช้งาน ให้ดึงเบาะรองศีรษะ เบาะรองหลัง ฯลฯ ขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าวัสดุ PU เสียหายหรือไม่ หากเสียหายโปรดหยุดใช้เก้าอี้นวดและติดต่อ Call center เบอร์ 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิค Coway เข้าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
2. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่ถูกต้องเท่านั้น



1. ก่อนนั่งลงโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดๆ อยู่ระหว่างที่วางแขน ที่วางขา พนักพิง และที่นั่งของเก้าอี้นวด
2. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก้าอี้นวดอยู่ในตำแหน่งตั้งตรงก่อนใช้งาน
3. ห้ามยืนบนเก้าอี้นวดขณะใช้งาน

ภาพประกอบฟังก์ชันการใช้งาน


ที่วางขาขึ้น

กดปุ่มนี้เพื่อยกขาขึ้น ปลดปล่อยปุ่มนี้ที่วางขาจะหยุดเคลื่อนที่และจะอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ



ยืดและหดที่วางขา

ที่วางขาสามารถยืดหรือหดได้ในระยะ 22 ซม.

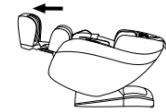


ที่วางขาลื่อนลง

กดปุ่มนี้เพื่อเลื่อนขาของ ปลดปล่อยปุ่มนี้ที่วางขาจะหยุดเคลื่อนที่และจะอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ



การนวดแขน

ที่วางแขนมีฟังก์ชันนวดด้วยลูกกลิ้งในตัว วางแขนของคุณไว้ในลูกกลิ้งที่วางแขนเมื่อลูกกลิ้งไม่ได้พองตัว เมื่อลูกกลิ้งพองตัว แขนและฝ่ามือจะได้รับการนวด

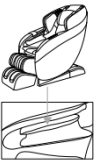

พนักพิงปรับเอนลง & ที่วางขาขึ้น

กดปุ่มนี้ พนักพิงจะเลื่อนลงและที่วางขาจะเลื่อนขึ้น ปลดปล่อยปุ่มนี้ พนักพิงและที่วางขาจะหยุดเคลื่อนที่และจะอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ



การนวดไหล่

ลูกกลิ้งปรับแบบอัดขึ้นรูปหลายชั้นถูกติดตั้งไว้ทั้งสองข้างของไหล่เพื่อบรรเทาความเมื่อยล้า




พนักพิงปรับขึ้น & ที่วางขาลื่อนลง

กดปุ่มนี้ พนักพิงจะยกขึ้นและที่วางขาจะเลื่อนลง ปลดปล่อยปุ่มนี้ พนักพิงและที่วางขาจะหยุดเคลื่อนที่และจะอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ



การนวดเท้า

มีลูกกลิ้ง 2 ลูก และลูกกลิ้ง 8 ใบ ช่วยนวดฝ่าเท้าและข้อเท้า

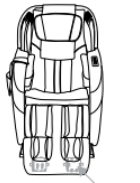

ไร้แรงโน้มถ่วง

กดปุ่มนี้พนักพิงจะเลื่อนลงและที่วางขาจะเลื่อนขึ้นจนกระทั่งเก้าอี้นวดเข้าสู่สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงโดยอัตโนมัติ กดปุ่มนี้อีกครั้ง พนักพิงและที่วางขาจะหยุดเคลื่อนที่และจะอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ




WARNING

1. โปรดแน่ใจว่าไม่มีผู้คน สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งของใดๆ อยู่รอบๆ เก้าอี้นวด เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่ไม่คาดคิด
2. ในการปรับพนักพิงควรระวังช่องว่างระหว่างพนักพิงและที่วางแขน
3. เมื่อที่วางขาเลื่อนขึ้นลง โปรดอย่ายืนหรือออกจากที่นั่ง
4. เมื่อที่วางขาเลื่อนขึ้นลง โปรดอย่าฝืนที่วางขาไม่ให้เคลื่อนไหวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเก้าอี้นวด
5. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 15 และ 16 เกี่ยวกับคำแนะนำเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

การปรับตำแหน่งเก้าอี้นวดไฟฟ้า



- ❶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคน สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งของใด ๆ อยู่
ในระยะของพนักพิงและที่วางขา

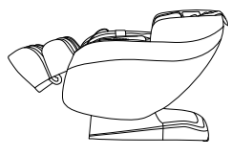


- ❷ ปรับเก้าอี้นวดกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยกดปุ่ม “ปรับพนักพิงขึ้น & ที่วางขาสูง” หรือ “ON/OFF” บนรีโมทคอนโทรล



- ❸ ใส่รีโมทคอนโทรลกลับเข้าไปในช่องใส่รีโมทคอนโทรลหลังจากที่เก้าอี้นวดกลับสู่ตำแหน่งเดิมแล้ว

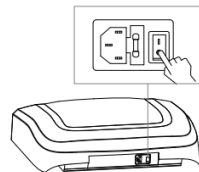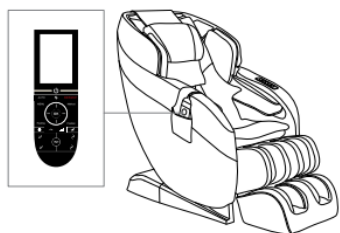

- ❹ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
(ข้อควรระวัง: เสียบปลั๊กให้ถูกต้องตำแหน่ง)

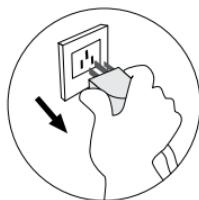

- ❺ ทำความสะอาดเก้าอี้นวดหากจำเป็น




ATTENTION!

- หลังใช้งาน ให้กดปุ่ม “เปิด/ปิด” เพื่อสิ้นสุดโปรแกรมการนวดทั้งหมดและรอการคืนค่า โปรดปิดเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่ไม่คาดคิดต่อเด็กหรือสัตว์เลี้ยง
- หลังใช้งานแล้ว ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟเพื่อป้องกันความชื้น สิ่งสกปรก และการเสื่อมสภาพของฉนวนไฟฟ้าในกรณีที่ต้องทำให้เกิดความเสียหาย


หนังสือกระดาษ

การทำความสะอาดโดยทั่วไป

ทำความสะอาดเก้าอี้นวดด้วยผ้านุ่มและแห้ง

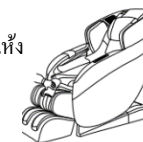


ห้ามใช้ทินเนอร์, น้ำมันเบนซิน, แอลกอฮอล์หรือสารเคมีอื่นๆ

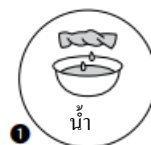

หากหนังสือสกปรก


- ❶ ใช้ผ้าเนื้อนุ่มจุ่มน้ำ บิดหมาดแล้วเช็ดคราบสกปรกบนพื้นผิวเบาๆ
- ❷ ชักผ้า บิดหมาดแล้วเช็ดอีกครั้ง
- ❸ ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ
- ❹ ปลดปล่อยให้แห้ง (ห้ามใช้ไคร้เป่าลม)

ชิ้นส่วนพลาสติก

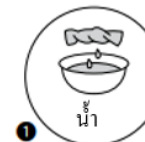

- ❶ ใช้ผ้าเนื้อนุ่มจุ่มน้ำ บิดหมาดแล้วเช็ดคราบสกปรกบนชิ้นส่วนพลาสติก
- ❷ ปลดปล่อยให้แห้ง

การทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล

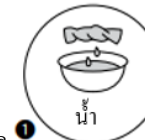


รีโมทคอนโทรล

- ❶ เช็ดรีโมทคอนโทรลด้วยผ้านุ่มๆ หลังจากใช้ผ้าเนื้อนุ่มจุ่มลงในน้ำและบิดหมาด
- ❷ ปลดปล่อยให้แห้ง

ห้ามใช้ทินเนอร์, น้ำมันเบนซิน, แอลกอฮอล์ หรือสารเคมีอื่นๆ

วัสดุที่เป็นผ้า

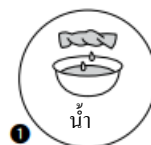

- ❶ ใช้ผ้าเนื้อนุ่มจุ่มน้ำ บิดหมาดแล้วเช็ดคราบสกปรกบนพื้นผิวผ้ารอบๆ ห้ามใช้ทินเนอร์, น้ำมันเบนซิน, แอลกอฮอล์ หรือสารเคมีอื่นๆ
- ❷ ปลดปล่อยให้แห้ง

เกี่ยวกับการทำความสะอาดเก้าอี้นวด



- ก่อนทำความสะอาดให้ถอดปลั๊กออกและอย่าสัมผัสปลั๊กขณะมือเปียก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือแห้งเมื่อจะเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ
- หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น ผู้ใช้อาจถูกไฟช็อตหรือได้รับบาดเจ็บได้

คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา

ปัญหา/ประเด็น	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	การแก้ไข
แก้อั้วนวดไม่ทำงานหลังจากเปิดเครื่อง	สวิตช์ปิดเปิดด้านล่างไม่ได้เปิดอยู่	เปิดสวิตช์ปิดเปิด (ดูหน้า 21)
	อาจยังไม่ได้เลือกโหมดการนวด	เลือกโปรแกรมนวดใดก็ได้เพื่อเริ่มการนวด
	ปลั๊กไฟไม่ได้เชื่อมต่อกับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กและเต้าเสียบมีการเชื่อมต่อ
	สายไฟหรือปลั๊กได้รับความเสียหาย	กรุณาติดต่อ Call center เบอร์ 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิค Coway ตรวจสอบและ/หรือเปลี่ยน
	ฟิวส์ของแก้อั้วนวดไฟฟ้าขาด	กรุณาติดต่อ Call center เบอร์ 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิค Coway ตรวจสอบและ/หรือเปลี่ยน
	วงจรภายในมีปัญหา	กรุณาติดต่อ Call center เบอร์ 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิค Coway ตรวจสอบและ/หรือเปลี่ยน
ภายในแก้อั้วนวดจะมีเสียงบ๊อบขณะใช้งาน	อาจได้ยินเสียงบ๊อบลม มอเตอร์ หรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกล	เป็นเรื่องปกติ
ตำแหน่งของลูกกลิ้งซ้ายและลูกกลิ้งขวาแตกต่างกัน	ลูกกลิ้งนวดไม่ได้ทำงานสมมาตรเสมอไป	เป็นเรื่องปกติ ท่านสามารถหยุดการนวดและเริ่มการนวดใหม่เพื่อให้ลูกกลิ้งนวดทำงานแบบสมมาตร
เสียงดังมากขึ้นทันทีขณะใช้งาน	อาจเกิดจากการใช้งานแก้อั้วนวดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน	ปิดเครื่องเพื่อให้แก้อั้วนวดได้พักประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเปิดเครื่องอีกครั้ง
	ชิ้นส่วนภายในอาจสึกหรอหลังจากใช้แก้อั้วนวดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน	กรุณาติดต่อ Call center เบอร์ 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิค Coway ตรวจสอบและ/หรือเปลี่ยน
โปรแกรมหยุดกะทันหันขณะใช้งาน	การเชื่อมต่อไฟฟ้าไม่ดี	เสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง
	การตั้งเวลาโปรแกรมอัตโนมัติเสร็จสิ้นแล้ว	ปิดเครื่องเพื่อให้แก้อั้วนวดได้พักประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเปิดเครื่องอีกครั้ง
พนักงานและที่วางขาไม่สามารถปรับเอนได้	ตรวจสอบว่ามีวัตถุใดๆ อยู่รอบๆ แก้อั้วนวดหรือไม่ หรือแก้อั้วนวดรับน้ำหนักมากเกินไปหรือไม่ บางครั้งแก้อั้วนวดอาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย	เอาวัตถุออกและปิดเครื่องเพื่อให้แก้อั้วนวดได้พักประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเปิดเครื่องอีกครั้ง
แก้อั้วนวดไม่สามารถกลับสู่ตำแหน่งเดิมได้	แก้อั้วทำงานหนักเกินไป หมดเวลาที่ตั้งไว้แล้ว	กรุณาติดต่อ Call center เบอร์ 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิค Coway ตรวจสอบและ/หรือเปลี่ยน
สายไฟหรือปลั๊กร้อนเกินไป	อาจทำงานหนักเกินไป	ปิดเครื่องเพื่อให้แก้อั้วนวดได้พักประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเปิดเครื่องอีกครั้ง
	ความผิดปกติอื่นๆ	หยุดใช้แก้อั้วนวดและติดต่อ Call center เบอร์ 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิค Coway ตรวจสอบและ/หรือเปลี่ยน



หมายเหตุ: หากปัญหาของท่านไม่ได้มีการระบุไว้ข้างต้น โปรดปิดแหล่งจ่ายไฟและติดต่อ Call center 1421 เพื่อให้ช่างเทคนิค Coway เข้าให้ความช่วยเหลือ

ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อ	แก้อั้วนวดไฟฟ้า Coway
รุ่น	MC-S01B/MC-S01W
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	220-240V ~ 50/60Hz
รูปแบบความปลอดภัย	ระดับ 1
กำลังไฟฟ้า	180 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม	84 กก./100.5 กก.
ขนาดบรรจุ	1160 × 770 × 1265 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)

Warranty

- เงื่อนไขและระยะเวลาการรับประกันสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการซื้อขายหรือตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาโปรดทราบว่าข้อกำหนดการรับประกันผลิตภัณฑ์ของเรานั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
- <https://www.coway.co.th/th/terms-of-conditions>

ประเทศไทย

ที่อยู่ : บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 75/104-106 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 38 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 คอลเซ็นเตอร์ : 1421

เพื่อชีวิตมีสุขภาพดีและสวยงามในทุกๆ วัน!